

CE – Dichiarazione di conformità

CE – Declaration of Conformity

Prodotto/product details		CE		
Prodotto/product name	Fitness			
Identificazione/type	Varianti Legenda codice U U=variante unica <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px; vertical-align: top;">U</td> <td style="padding: 5px;"> Lastra portante, monoblocco a zone di sostegno differenziato alta 15 cm in poliuretano NIR27 produttore Orsa Foam Spa accoppiato a 2,5 cm di poliuretano 28G di Vefer Spa e fodera bordata sfoderabile in tessuto di alta qualità Fascia Stanlord anallergico antiacaro </td> </tr> </table>		U	Lastra portante, monoblocco a zone di sostegno differenziato alta 15 cm in poliuretano NIR27 produttore Orsa Foam Spa accoppiato a 2,5 cm di poliuretano 28G di Vefer Spa e fodera bordata sfoderabile in tessuto di alta qualità Fascia Stanlord anallergico antiacaro
U	Lastra portante, monoblocco a zone di sostegno differenziato alta 15 cm in poliuretano NIR27 produttore Orsa Foam Spa accoppiato a 2,5 cm di poliuretano 28G di Vefer Spa e fodera bordata sfoderabile in tessuto di alta qualità Fascia Stanlord anallergico antiacaro			
Destinazione d'uso/intended use	Materasso confortevole, per pazienti e ausilio alle terapie mediche/ / Comfortable mattress, for patients and aid in medical therapies			
Classificazione 2017/745/CEE, Allegato VIII punto 4 Classification according to 2017/745/EEC, annex VIII number 4	Classe I, per la regola 1/ class I per rule 1			
Altre classificazioni/other classing	N.A.			
Ente notificato/Notified body	N.A.			
Numero certificato/certificate number	N.A.			
Procedura di certificazioni in accordo con 2017/745/CEE/Procedure according to 2017/745/EEC	Allegato II, Allegato III/Annex II, Annex III			
Numero di registrazione/NSIS number	2820997			



Codice GMDN/GMDN code	47520
Codice CND/CND code	Y0899
Codice Udi-Di di base – Udi-Di/Base Udi-di-Udi-di	PP1306200000675 - 112002585802
Norme armonizzate/Harmonized standards	Regolamento 2017/745/CEE/, EN 12182, EN 14971, Regolamento UE 1007/2011, UNI EN 14971, UNI EN 1957/2012, UNI EN 10707/2003
Altre norme applicate/Other standards	Altre

Il fabbricante dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto descritto sopra è in accordo con il regolamento 2017/745/CEE e successive modificazioni

We declare under sole responsibility that the products described above are in compliance with regulation 2017/745/EEC.

Serra De' Conti (AN), 03/06/2025

Lordflex's Srl

Il titolare

FITNESS

materassi ortopedici ed ergonomici

Manuale d'uso

 Lordflex's
Via Carrara 11
60030 Serra de Conti (AN)



Pag. 1 di 7

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la preferenza riservata al ns. materasso e ci auguriamo che essa possa rispondere alle Sue aspettative.

Come cliente Lordflex's Srl Lei ha ora il privilegio di avere in ogni momento uno staff di tecnici specializzati a Sua completa disposizione.

Per ogni Sua esigenza non esiti a contattarci con i mezzi che riterrà più idonei e opportuni; al fine di rendere più esaurienti le nostre risposte La preghiamo di citare sempre il modello ed il numero di matricola del Suo materasso.

La invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel presente manuale, questo Le sarà di valido aiuto per l'utilizzo ottimale e per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche della Suo materasso.

Cordialmente Le auguriamo buon riposo.

Manuale Utente

INDICE

1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA	4
3. SIMBOLI UTILIZZATI	4
4. DESCRIZIONE DEL MATERASSO	5
5. INSTALLAZIONE E USO	5
6. ETICHETTE	6
L'etichetta è apposta nella posizione indicata in figura:.....	6
7. PULIZIA	7
8. SMALTIMENTO	7
9. GARANZIA	7

1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

PRIMA DI PROCEDERE ALL'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE E LE SEGUENTI AVVERTENZE E PRECAUZIONI



- Evitare l'esposizione a fonti di calore eccessive.
- Maneggiare con cura.
- Utilizzare il presente dispositivo soltanto in conformità alla sua destinazione d'uso, prevenzione delle piaghe da decubito e trattamento degli stati dolorosi alla schiena e alla cervicale dovuti alla postura.
- Qualsiasi manipolazione, sostituzione, intervento sul dispositivo non effettuato da personale autorizzato Lordflex's comporta la decadenza della garanzia e la non responsabilità del costruttore per danni a persone o cose che possono derivarne;
- Rimuovere la fodera di rivestimento del materasso soltanto per operazioni di pulizia/disinfezione dello stesso.

2. DESTINAZIONE D'USO

Il dispositivo medico oggetto del presente manuale di uso è un materasso confortevole, per pazienti e per ausilio alle terapie mediche

3. SIMBOLI UTILIZZATI

Nel presente manuale sono utilizzati simboli per richiamare l'attenzione dell'utente su informazioni ed osservazioni di particolare importanza, i simboli sono i seguenti:



Simbolo di Fabbrikante del dispositivo medico



Conformità del dispositivo rispetto al regolamento europeo 2017/745.

4. DESCRIZIONE DEL MATERASSO

4.1 CARATTERISTICHE GENERALI

Il prodotto Fitness è un materasso studiato appositamente per ridurre gli stati dolorosi dovuti alla postura. Sono realizzati in poliuretano espanso flessibile, con materiali ecologici ad alto spessore e bassa perdita di portanza per garantire il mantenimento nel tempo dell'elasticità del prodotto.

L'anima del dispositivo è realizzata con una lastra monoblocco di poliuretano espanso flessibile con elevate caratteristiche di elasticità e resilienza con profilo sagomato per massaggiare in modo idoneo la schiena dell'utilizzatore.

I materassi sono fabbricati nelle seguenti dimensioni:

Larghezza da cm 80 a cm 180

Lunghezza da cm 190 a cm 200

Incremento della misura pari a 5 cm

Sono disponibili realizzazioni fuori misura su richiesta.

5. INSTALLAZIONE E USO

L'installazione del materasso è estremamente semplice. Una volta ricevuto, togliere l'imballo, verificare l'integrità e posizionare il materasso sopra alla rete del letto.


Per un corretto uso del materasso occorre utilizzarlo come indicato nell'etichetta e ruotare la fodera di rivestimento in base alla stagione (lato estivo - lato invernale).

6. ETICHETTE

Il materasso è identificato dalla seguente etichetta posizionata sopra al materasso stesso.



L'etichetta è apposta nella posizione indicata in figura:

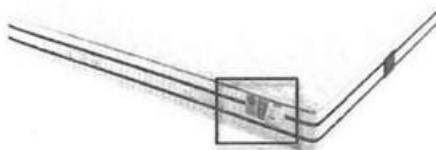

7. PULIZIA

Ad intervalli regolari pulite e disinfettate il materasso. Non immergete il materasso in acqua.
In caso di uso in ambito ospedaliero/clinico disinfettare e igienizzare il materasso ad ogni cambio paziente. Consigliamo per la fodera il lavaggio a secco e l'asciugatura non a tamburo.

8. SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto con i rifiuti urbani e secondo la norma vigente nel proprio comune di residenza.

9. GARANZIA

La Lordflex's garantisce il materasso contro difetti di materiale e di produzione per un periodo di 24 mesi dalla consegna.

Nota: ogni tentativo di riparazione, ripristino o modifica del materasso, che esuli da quanto contemplato nel manuale utente, da parte di persona non autorizzata dalla Lordflex's, farà decadere la garanzia.

Per richiedere l'intervento in garanzia, l'acquirente, immediatamente dopo il rilevamento dell'evento riguardante il reclamo, dovrà contattare la Lordflex's per iscritto o telefonicamente.

In nessun caso la Lordflex's sarà responsabile di danni diretti, indiretti, a persone animali od oggetti causati da incuria da parte del cliente.